

Dentocrown HD¹

Matériau de restauration provisoire

Redécouvrez
Dentocrown HD



Temps de prise ajusté

Stabilité du matériau

Rendu esthétique naturel

Ergonomie

Enhance your
daily practice*



Une couronne stable et naturelle

Points forts

- Temps de prise : 2 min 30
- Stabilité du matériau pendant la mastication
- Rendu esthétique naturel
- Pistolet ergonomique

Indication

Fabrication de couronnes, bridges, inlays, onlays, couronnes partielles et facettes provisoires.

ASTUCES

Il est possible de rebaser le Dentocrown HD avec l'une des méthodes :

- > Éliminer la couche visqueuse (couche d'inhibition) qui se forme à la surface de la dent provisoire avec de l'alcool modifié. Rebaser.
- > Utiliser le ciment provisoire **Dentotemp** pour combler les manques.



Embouts mélangeurs & embouts à pointe intra-orale fine



Pistolet mélangeur




Cas clinique

Exemple de cas clinique du Dr Bury Laurence




Vue initiale.

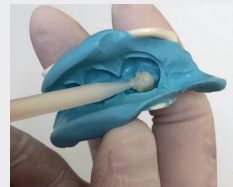

1 Remplissage de l'empreinte avec le Dentocrown HD.



2 Vue dans l'empreinte.

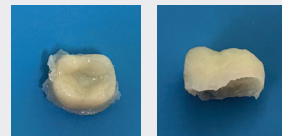

3 Vue de la dent provisoire.



Résultat final.

Dentocrown HD	
Cartouches	
A1 74 g + 10 embouts mélangeurs	DWNHD50-A1
A2 74 g + 10 embouts mélangeurs	DWNHD50-A2
A3 74 g + 10 embouts mélangeurs	DWNHD50-A3
Embouts mélangeurs¹⁶	
10 embouts mélangeurs pour cartouche	DWNE-10
Pistolet mélangeur⁹	
Pistolet mélangeur 1:1 / 2:1 pour cartouche de 50 ml	153241

Données Techniques**

- > Résistance à la compression élevée..... 330 MPa
- > Résistance à la flexion..... 70 MPa
- > Temps de préparation..... 45 sec max
- > Temps en bouche..... 45 sec



itena-clinical.com

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.
FP.DENTOCROWNHD.FR-B-04/2024

Enhance your daily practice

Rejoignez-nous!



*Améliorer votre pratique quotidienne. **Rapport interne, Itena Clinical, "Dentocrown HD"

¹ Dispositif Médical Classe IIa, CE 0425 - Fabricant : Itena Clinical. ¹⁶ Dispositif Médical classe I. Fabricant : DXM CO, Ltd, Corée du Sud. Mandataire : CMC Medical Devices & Drugs, Espagne. ⁹ Dispositif Médical Classe I. Fabricant : Medmix Switzerland AG, Suisse. Mandataire : Medmix GmbH, Allemagne. Réserve à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Lire attentivement la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.