

Provitemp

Ciment de scellement provisoire
de courte durée (jusqu'à 6 semaines)



Enhance your
daily practice*

Étanchéité du scellement

Praticité de manipulation

Utilisable sur dent vivante



Un scellement étanche & sans eugénol

Points forts

Étanchéité du scellement


- > Faible solubilité (7µg/mm³)

Praticité de manipulation

- > Auto-polymérisation en 2 étapes : gel facilitant le retrait des excès et prise finale
- > Mélange consistant et homogène pour une application et distribution contrôlées, grâce à la seringue automix et aux embouts mélangeurs

Utilisable sur dent vivante

- > Composition sans eugénol pour éviter les irritations et les interférences sur la polymérisation des scellements définitifs à base de résine

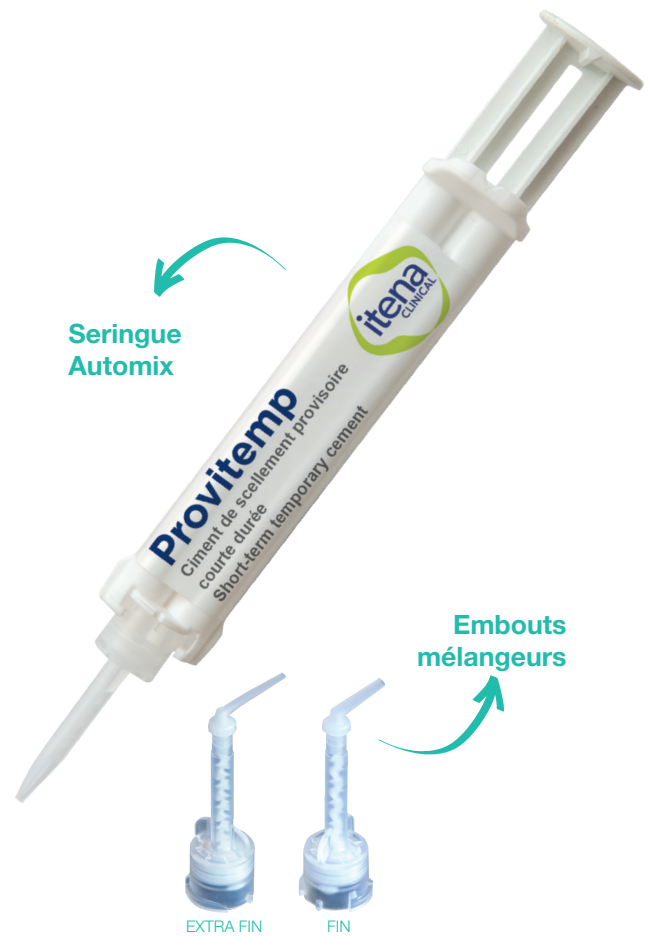

Indication

Scellement provisoire de couronnes, bridges, inlays, onlays et attelles provisoires.

Provitemp

Provitemp Automix
1 seringue de 6 g + 10 embouts mélangeurs **PTEMP1-10**

Provitemp Automix
2 seringues de 6 g + 20 embouts mélangeurs **PTEMP2-VP**

Embouts

Recharge de 20 embouts mélangeurs **DTEM-20**

Recharge de 25 embouts mélangeurs + 25 pointes intra-orales fines (Longueur 100 mm Ø 1,1 mm) **DCE-50**

Recharge de 25 embouts mélangeurs + 25 pointes intra-orales extra-fines (Longueur 135 mm Ø 0,09 mm) **DCEXXF-50**



Enhance your daily practice

itena-clinical.com

Central Parc Bat B, 97 Allée de la Louve, 93420 Villepinte - FRANCE - T. + 33 1 45 91 61 40.
FPPROVITEMP.FR | IND.A 02/26

Rejoignez-nous!



*Améliorer votre pratique quotidienne